


TANDA

clear+™

**Professionel
akne behandling**

Brugervejledning

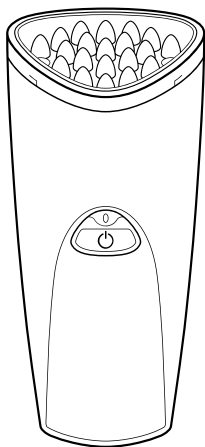

Tanda Clear+ er det første og eneste apparat, der kombinerer kraftfuldt bakteriedræbende blåt lys med vibration og mild varme. Sammen giver teknologien et uovertruffen klinisk beviset resultat, og hurtigere end nogensinde genskabes en tilpas, ren og smuk hud.

Clear+ er udviklet efter de højeste standarder indenfor kvalitet, funktionalitet og design.

Læs venligst hele brugervejledningen, så du opnår den sikreste og mest effektive behandling.

Ved spørgsmål eller reklamation bør du kontakte din Tanda Clear+ forhandler.

God fornøjelse

Pakkens indhold

- Clear+ håndstykke
- AC strømforsyning
- Brugervejledning


Hvad er apparatet beregnet til ?

Clear+ behandler let til moderat akne

Er Clear+ rigtig for dig ?

Akne type	Hudens tilstand	Er Clear+ rigtig for dig?
Mild Akne	Betændte røde bumser Færre end 20 lukkede komedoner, 15 betændte røde bumser eller 30 bumser, hvor ikke alle er betændte.	Ja
Moderat Akne	Generelle røde betændte bumser og pustler (gulligt indhold) 20-100 komedoner, 15-50 betændte bumser, 30-125 bumser, hvor ikke alle er betændte.	Ja
Svær Nodulær Akne	Betændte bumser og pustler (gulligt indhold) med få dybe nodulær akne udbrud (cyste lignende). Mere end 5 cyster (solid masse der ligger under hudens overflade), mere end 100 komedoner, mere end 50 betændte bumser eller mere end 125 forskellige urenheder.	Nej, kontakt din hudterapeut, der vil anbefale den mest optimale behandling.
Svær Cystisk Akne	Mange nodulær cyster og ardannelser.	Nej, kontakt din hudterapeut, der vil anbefale den mest optimale behandling.

Hvis ja - så læs kontraindikationer, advarsler og forholdsregler, så du er sikker på, at Clear+ er sikker for dig at bruge.

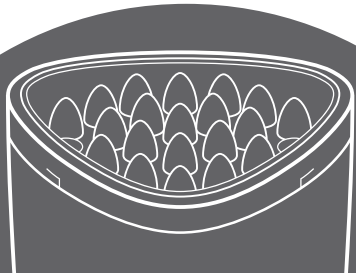

Apparatets dele

Behandlings
overflade (1)


Indikatorlys (2)

Tænd/sluk (3)

AC stømforsyning (4)

Clear+ håndstykke (5)

Skift af
behandlingshovedet (6)

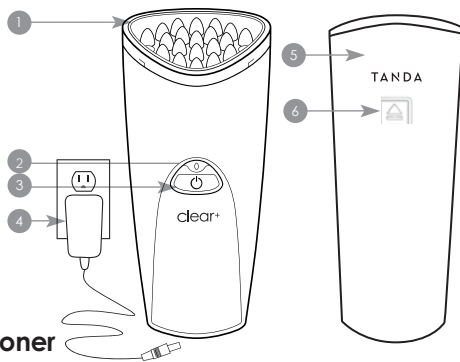

Apparatets funktioner

- **Tænd/sluk knappen** starter apparatet. Når indikatoren lyser grøn, er den klar til brug.
- **Berørings-sensoren** aktiverer apparatet, når behandlingshovedet rører ved huden.
- **Tydelige bip** indikerer status på behandlingen. Et enkelt bip hver 30 sek. fortæller dig, at behandlingen er i gang. 2 hurtige bip fortæller dig, at behandlingen er komplet. Tryk på tænd/sluk knappen for at aktivere apparatet igen.
- **Temperatur-sensoren** kontrollerer temperaturen på Clear+ behandlingshovedet løbende og slukker apparatet, hvis det bliver for varmt. Lad apparatet køle af i 5-10 min. for at behandlingen genoptages .
- **Automatisk slukning** af apparatet, hvis der ikke er kontakt med huden i min. 20 sek.

Kontraindikationer

- **Bruges ikke** hvis du har, haft kræft eller på områder med mistanke om kræft. Apparatet er ikke testet på disse områder, så effekten er uvis.
- **Det anbefales** at du udfører en lille test af huden, inden du påbegynder behandlingen.

Advarsler

- **Bruges ikke** hvis du er gravid eller ammer
- **Bruges ikke** hvis du lider af migræne
- **Bruges ikke** hvis du er lysoverfølsom
- Nogle sygdomme kan relateres til lysoverfølsomhed: polymorft lysudslet, porfyrier, soludløst nældefeber og lupus.
- Noget medicin kan relateres til lysoverfølsomhed: NSAIDS, steorider, antibiotika, phenothiazine, thiazide, diuretics, sulfonyluraes, sulfonamides, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, Alpha Hydroxy Acids (AHAs), Beta-Hydroxy Acids (BHAs), Retin-A, Accutane, topical retinoids eller/og Azelaic acid.
- Stråle eller kemoterapi
- Ved indtagelse af en eller flere af disse typer medicin, bliver huden ofte mere lysoverfølsom, så reaktioner kan opstå. Konsulter egen læge inden brug.
- **Bruges ikke** hvis huden er særlig sensitiv: psoriasis, eksem, solskoldning, herpes, sår eller udslet.
- **Bruges ikke** på mørke pletter, store fregner, modermærker eller vorter.
- **Bruges ikke** på eller tæt på en steroid-indsprøjtning i min. 6 mdr.
- **Lad ikke** små børn lege med apparatet der kan indeholde små dele.

Sikker brug af et elektrisk apparat

- **Sæt altid** strømforsyningen i apparatet før du tilfører strøm. Brug kun den tilhørende ledning.
- **Hold en sikker afstand til vand.** Hvis apparatet uventet falder i vandet skal den straks fjernes og slukkes.
- **Placer ikke apparatet** hvor den kan falde ned i håndvasken eller badekaret. Tab den ikke ned i vand eller anden væske.
- **Brug aldrig apparatet** hvis ledning eller stikket er skadet, hvis den ikke virker korrekt, hvis den er blevet tabt, eller er gået i stykker, eller hvis apparatet har været under vand.
- **Lad være med** at skille apparatet ad, da det både kan ødelægge apparatet og give personskade.
- **Tab eller indsæt ikke noget i apparates åbning.**
- **Hold ledningen væk fra varme overflader.**

Forholdsregler

- **Stop øjeblikkeligt** hvis du oplever ubehag eller er i tvivl om korrekt brug.
- **Læs brugervejledningen før brug af Clear+.**
- **Brug kun apparatet til det, som den anbefales til.**
- **Kig ikke direkte ind i behandlingshovedet** når lyset er tændt og undgå at lyse ind i andres øjne.
- **Brug ikke apparatet på steder** hvor der bruges andre enheder, der udsender elektromagnetisk energi uden afskærmning. Bærbart eller mobilt kommunikationsudstyr, der bruger radiofrekvenser, kan påvirke elektrisk medicinsk udstyr.

Brug ikke apparatet, hvis du er lysoverfølsom. Hvis du er i tvivl, om du er overfølsom udføres testen for lysoverfølsomhed.

- **En forlængelse af behandlingen** eller brug af apparatet oftere end anbefalet, kan resultere i en overophedet overflade på din Clear+. Du kan derved risikere irritation og rødme i huden.
- **Undersøg dit apparat for skader før brug.**

Anvendelse af Clear+

Hvis det er første gang, du bruger apparatet, så husk at udføre testen for lysoverfølsomhed.

1. Pak apparat og ledning ud.
2. Sæt strømforsyningen nederst i apparatet og den anden ende i stikkontakten. Apparatet lyser grøn, når strømmen er tilsat.
3. Din Clear+ er nu klar til brug

Lysoverfølsomheds test

Følg disse instruktioner for at teste om du er overfølsom overfor lys

1. Tænd på den orange knap.
2. Placer apparatet på det område du ønsker at behandle. Lad apparatet være i kontakt med huden under hele behandlingstiden. (3 min.)
3. Du bør ikke opleve nogen reaktion i de næste 24 timer. Hvis du oplever en reaktion, bør din læge kontaktes inden yderligere brug.
4. En negativ reaktion vil være smerte, ubehag, rødme og måske hævelser.

Behandlingsprocedure Clear+

STEP 1. Forbered huden før behandling

Før brug renses huden for makeup og cremer, da de kan indeholde lysreflekterende ingredienser.

STEP 2. Tænd apparatet


Tryk på tænd/sluk knappen. Et kort bip signalerer at apparatet er aktiveret og klar til brug.

STEP 3. Udfør behandlingen

Placer behandlingshovedet på det ønskede område i 3 minutter - 2 gange dagligt. Fortsæt indtil resultatet er tilfredsstillende.

STEP 4. Afslutning

Påfør din favorit "ikke-fedtende" cremepleje.

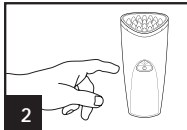

Forventninger

Første 24-48 timer:

Den milde varme, der føles under behandlingen, oplever de fleste som beroligende. Mange brugere opnår en reduktion af urenhedernes størrelse og rødme.

Efter 1 uge:

De fleste brugere vil se en reduktion af urenhederne. Flertallet opnår også en reduktion af rødme og fedtstof samt hudens generelle velbefindende genfindes. Ved regelmæssig brug af Clear+, reduceres mængden af bakterier, så fremtidige udbrud undgås.

Beskyttelsesbriller

Clear+ er testet sikker, og der er ingen risiko ved brug af apparatet. Hvis du foretrækker det, kan du anvende beskyttelsesbriller under behandlingen.

Rengøring


Rengør behandlingshovedet efter brug, så apparatet er hygiejnisk at anvende.

Apparatet er ikke vandtæt, så sørg for at holde afstand til vand eller anden væske. Vask ikke apparatet i opvaskeren, da det kan ødelægge apparatet. Hvis apparatet har været under vand anbefales det ikke at anvende apparatet.

Brug en fugtig, blød frugfri klud og et mildt alkoholfrit rengøringsmiddel til at rengøre behandlingshovedet. Tør efter med en ren fugtig klud kun med vand og afslut med en tør klud.

Udskiftning af Clear+ behandlingshovedet

Clear+ behandlingshovedet indeholder 6000 stk. - 3 minutters behandling. Derefter vil behandlingshovedet ikke mere udsende lys.

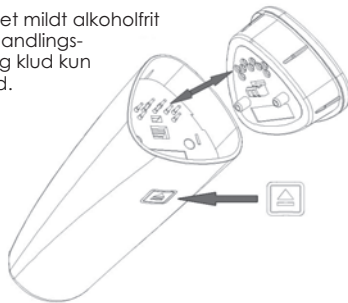

Specifikationer

Tanda Clear+ apparat = Tanda Series 4



TYPE BF ANVENDT DEL



Vigtigt! Se MEDFØLGENDE DOKUMENTER



Tüv-certificeringsmærke



Følg brugervejledningen

IP23

IP kapslingsklasse

Specifikationer strømadapter: Model nr. UE15WCP-090130SPA, medicinsk kvalitet, Input: 100-240V, 50-60Hz, 400mA, Output: 9.0VDC, 1.3A max. Model No. UE05WCP-090055SPC, medical grade, Input: 100-240V, 50-60Hz, 180mA. Output: 9 VDC, 0.55A max.

Universal rejseadapter: Apparatet er designet til at oplade sikkert med både 110/120V eller 220/240V. Den kan anvendes i alle lande ved brug af universal adapter.

Opbevaring mellem behandlinger: Omgivelsestemperatur: 5 til 40 grade. Relativ luftfugtighed: 15% til 93%, ikke-kondenserende; 700-1060 hPa

Transport/Butiksspecifikationer: Omgivelsestemperatur: 0 til 60 grader; Relativ luftfugtighed: 10% til 90, ikke kondenserende; 700-1060 hPa

Service

For rekvirering af service og reservedele i Danmark kontaktes den butik, hvor produktet er købt.

Garantien

Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på Deres nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. Garantien omfatter materialer, arbejdsløn og kørsel.

Ved henvendelse om service bør De oplyse produktets navn.

Garantien dækker ikke:

- Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl
- Hvis der er brugt uoriginale reservedele
- Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installationen er sket som anvist
- Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet

Transportkader

En transportkade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportkade. Evt. transportkader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

Erhvervskøb

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervs lignende formål (kosmetolog, frisør og lign.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere. I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.

Bortskaffelse



WEEE (affald af elektrisk og elektronisk udstyr)

Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i EU. For at forhindre eventuel skade på miljøet og menneskers sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse skal produktet afleveres til genbrug for at fremme en bæredygtig genanvendelse af materialeressourcer. Indlever det brugte apparat på en genbrugsstation, eller kontakt forhandleren. De kan sikre, at produktet genbruges på forsvarlig miljøvenlig vis.



Dette symbol betyder, at batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, da de indeholder stoffer, der kan være miljø- og sundhedsskadelige. Bortskaf batterierne ved at lægge dem i en genbrugscontainer.

CE 0413



mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71
D-30855 Hannover-Langenhagen

TANDA

Producent:
Tanda Beauty Canada Inc.
11-380 Jamieson Parkway
Cambridge ON, N3C 4N4

Distributør:
Witt A/S
Gødstrup Søvej 9
7400 Herning
info@witt.dk