

BEKYMRET FOR RYNKER? TÆNK NYT

HUDFORNYELSE MED LASER

Se det i øjnene: ingen hud undgår ældning. Allerede fra midt tyverne dukker de første linier op omkring øjne og mund. Bevidstheden herom vokser dag for dag.

Kan du ikke lide hvad du ser ? ... så se lyset i Illuminage.

Første og eneste FDA godkendte Home Beauty Laser til reduktion af fine linier omkring øjne og mund.

UDGLATTENDE LASER™

Innovativ laser teknologi stimulerer hudens naturlige produktion af nye kollagene fibre. Hudens støttende struktur genskabes indefra, og linierne udglattes markant. Effektiv som en professionel laser behandling, men sikker at bruge hjemme.

Laserens lys sendes dybt ned under hudens overflade, der hvor rynkerne opstår. Det er her i de støttende lag, at kollagen produceres og laser lyset stimulerer huden til at øge produktionen.

Når hele området er behandlet, forbedrer den øgede produktion af kollagen hudens fasthed, så overfladen udglattes og huden fremstår sundere, friskere og betydelig yngre.

Præcis behandlingsteknologi udløses kun når laser håndstykket placeres korrekt på hudens overflade, så begge RF flader er i fuld kontakt med huden. Efter 200 "skud" slukkes laseren automatisk af sikkerhedsmæssige årsager.

Det innovative håndstykke opsamler behandlingsdata til kundens personlige online profil, så behandlingsforløbet kan følges tæt.

Kontraindikationer:

- Hudirritation/infektioner/rifter

- Solbrændthed
- Indtagelse af antibiotika
- Kosmetisk behandling de første 3 mdr. efter
- Rødme fra tidligere behandling

Forberedelse:

Oplad din laser 4 timer før den tages i brug første gang. Placer laseren et sikkert sted, ikke for tæt på vand, hvor du nemt kan anvende den og nyde synet af det smukke design. Hver gang du placerer håndstykket i basen der er tilsluttet strøm oplades den. Et diskret blåt lys bliver synligt nederst på inder-siden af håndstykket når den oplader.

Anvendelse:


- Afrens og tør huden af før behandlingen påbegyndes
- Aktiver håndstykket ved at trykke på power knappen i 3 sek.
- Hvis håndstykket ikke aktiveres i mere end 30 sek. slukkes den automatisk.
- Med power knappen kan du skifte mellem lav og høj intensitet. Start altid på den lave og øg

hvis huden reagerer positivt.

- Test laseren på underarmen, der er fri for hår og mørke pletter, inden du påbegynder behandlingen i ansigtet.
- Hold hele behandlingshovedet fast på huden. Når berøringssensoren godkender den fulde kontakt med huden leveres først hvidt lys der indikerer kontakt med huden, derefter et blåt der behandler huden i dybden, og en kort tone der indikerer, at området er behandlet.
- Efter hvert "skud" løftes behandlingshovedet fra hudens overflade og flyttes ca. 1 cm så området overlappes ganske lidt. Laseren skal ikke aktiveres mellem hvert "skud", den udsender selv lyset så snart, at der er fuld kontakt med huden.
- Laseren er skabt til specifikt at behandle rynkerne omkring øjen og mund. Opdel disse områder i 4 zoner. Zone A & B er fra øjet og ned til kindbenet. Dette område kan kræve op til 40 "skud" på hvert område - alt efter hvor stort et areal, du behandler.

Stræk evt. huden ud med 2 fingre, så får du en mere præcis placering.

- Området omkring munden og fra næse-fløjen til mundvigen kaldes zone C & D. Også disse zoner kan begge behandles med op til 40 "skud" pr. område.
- Når behandlingen er udført slukkes laseren ved at trykke på power knappen i 3 sek.
- Rengør behandlingshovedet med et desinfektionsmiddel og sæt det tilbage i basen.
- Påfør huden en beroligende og fugtgivende cremepleje.
- Hvis huden føles varm og den er rød på de behandlede områder, er det helt normalt.

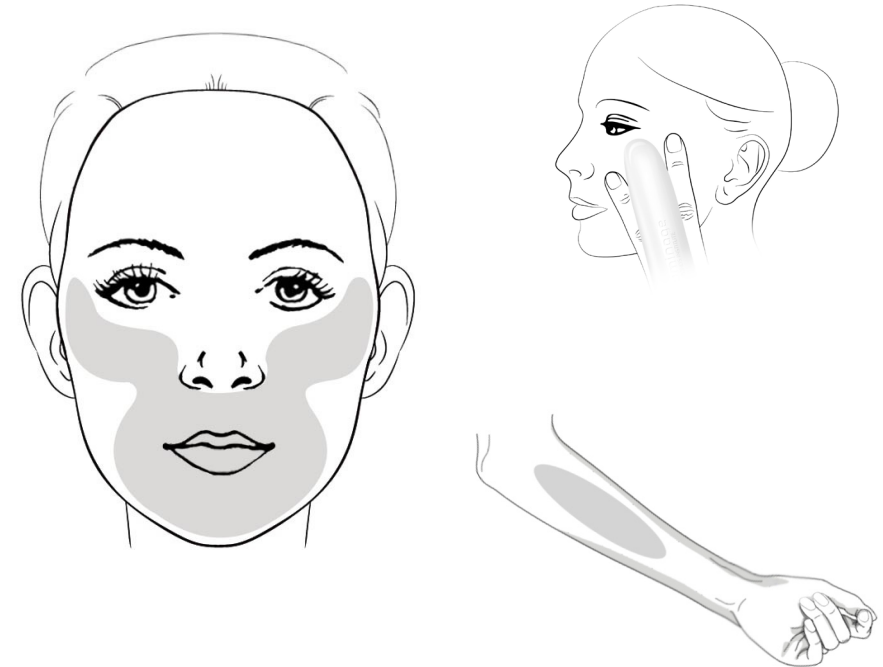

ILUMINAGE LASER SPECIFIKATION

Bølgelængde:	1440 nm
Høj intensitet:	4 J/cm ² gns. pr. puls
Lav intensitet:	3 J/cm ² gns. pr. puls
Behandlingsområde:	7 mm ²
Pulsbredde:	60 msek.
Pulsgentagelse:	Op til 1 Hz

