



TANDA

DK

zap™

brugervejledning




## Tak...

for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blå LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og varme åbner porerne, så den dybdegående behandling effektiviseres.

Ingen smerte - ingen tørhed - ingen irritation og bedst af alt: ingen bumser!

Apparatets dele:

- Zap-behandlingshoved (1)
- Indikatorlampe (2)
- Tænd/sluk-knap (3)
- Batterirumsåbning (4)

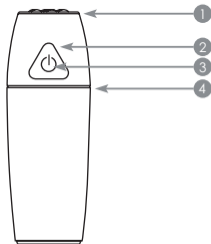

## Service

For rekvirering af service og reservedele i Danmark kontaktes den butik, hvor produktet er købt.

## Garantien

Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på Deres nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. Garantien omfatter materialer, arbejds løn og kørsel. Ved henvendelse om service bør De oplyse produktets navn.

## Garantien dækker ikke:

- Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl
- Hvis der er brugt uoriginale reservedele
- Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installationen er sket som anvist
- Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet

## Transportskader

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

## Erhvervskøb

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (kosmetolog, frisør og lign.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere. I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.

## Hvad er apparatet beregnet til?

Tanda Zap behandler let til moderat akne og ikke svære tilfælde af nodulær og cystisk akne.

### Kontraindikationer

- FORSIGTIG! Brug aldrig apparatet på andre læsioner end mild til moderat akne. Hvis det bruges på andet, kan det forsinke den optimale medicinske behandling.
- FORSIGTIG! Lad ikke børn under 14 år bruge apparatet uden opsyn. Det kan medføre personskeade, hvis den bruges forkert.
- FORSIGTIG! Brug ikke apparatet, hvis du er lysfølsom. Det kan medføre en uønsket lysfølsomhedsreaktion. Det anbefales at foretage en test for lysfølsomhed på et lille område, f.eks. på underarmen.

## Test for lysfølsomhed

Følg nedenstående anvisninger for at se, om du er lysfølsom:

1. Tryk på den orange tænd/sluk-knap.
2. Apparatet vibrerer, og det bakteriedræbende blå lys tændes.
3. Placer og hold Zap på armens inderside i den to minutters lange behandlingstid.
4. Tryk på den orange tænd/sluk-knap igen for at foretage endnu en to minutters behandling på samme område.
5. Vent 24 timer. Du bør IKKE mærke nogen bivirkninger de næste 24 timer.
6. En bivirkning er smerte eller ubehag i det område, der er blevet behandlet, eller langvarig rødme på huden.



- FORSIGTIG! Brug ikke apparatet, hvis du tager medicin, der medfører lysfølsomhed. Eksempler på medicin, der kan gøre dig lysfølsom, er blandt andet: antihistamin, der bruges i medicin mod forkølelse og allergi, NSAID'er (non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler), der bruges til at lindre smerter og dæmpe betændelse, og antibiotika, herunder tetracyclin og sulfonamider.
- FORSIGTIG! Brug ikke apparatet sammen med væsker, salver etc., der indeholder varmfremkaldende ingredienser, da det kan medføre brandsår.
- FORSIGTIG! Brug ikke apparatet på eller i nærheden af områder, hvor du har fået en steroid-injektion for nylig. Det kan medføre en uønsket lysfølsomhedsreaktion.
- FORSIGTIG! Brug ikke apparatet på eller omkring øjnene eller øjenlågene, og kig ikke direkte ind i det blå lys. Det kan medføre alvorlige øjenskader, herunder permanent eller forbigående synstab eller hovedpine.
- FORSIGTIG! Brug ikke apparatet på skjoldbruskkirtlen (halsområdet). Det kan stimulere kirtlen.

## Advarsler

Advarsel: Tag følgende forholdsregler for at reducere risikoen for elektrisk stød, der kan medføre personskade eller dødsfald:

- Undlad at placere eller opbevare apparatet et sted, hvor der er risiko for, at det falder ned i et badekar eller en vask. Sørg for ikke at lægge eller tabe apparatet i vand eller andre væsker.
- Sørg for aldrig at tage eller indsætte noget i enhedens åbninger.
- Brug kun de batterier, der anbefales til dette apparat.
- Brug aldrig apparatet, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det har været tabt, er blevet beskadiget eller har været nedsænket i vand. Returner apparatet for at få det undersøgt og repareret.
- Tag batterierne ud, hvis du forventer, at apparatet ikke skal bruges i en længere periode, f.eks. en måned.
- Undlad at adskille eller ændre apparatet, da det kan medføre skade på apparatet, elektrisk stød, brand, personskade eller fejl på apparatet. Apparatet indeholder ingen dele, der skal vedligeholdes af brugeren.

Advarsel: Tag følgende forholdsregler for at forebygge brand og brandsår:

1. Hold apparatet væk fra steder, hvor der bruges aerosol produkter (spray), eller hvor der foretages medicinsk behandling med ilt.
2. Sluk for apparatet, hvis det bliver meget varmt.

Advarsel: Stands øjeblikkeligt brugen af apparatet, hvis der forekommer bivirkninger eller langvarig rødme. Det kan være en lysfølsomhedsreaktion.

## Forholdsregler

- Læs alle anvisninger, før brug af Tanda Zap.
- Brug kun apparatet til det, det er beregnet til, og som er beskrevet i denne vejledning. Ellers kan det medføre forsinkelse af det optimale resultat.
- Stands brugen, hvis du oplever ubehag. Du kan være lysfølsom.
- Brug ikke apparatet på steder, hvor der bruges andre enheder, der udsender elektromagnetisk energi uden afskærmning. Bærbart eller mobilt kommunikationsudstyr, der bruger radiofrekvenser, kan påvirke elektrisk medicinsk udstyr.

- Langvarig eller overdreven brug ud over den anbefalede behandlingstid to til tre gange om dagen kan medføre, at apparatets behandlingsoverflade bliver varm. Temperaturen kommer ikke op over 43 °C ved brug ved stuetemperatur (25 °C), men kan medføre bivirkninger såsom ubehag eller langvarig rødme i området.

## Anvendelse

Bemærk, at nogle mennesker er lysfølsomme. Hvis du tror, at du måske er lysfølsom, må du ikke bruge Tanda Zap uden først at foretage en test for lysfølsomhed. Se testen for lysfølsomhed, der er beskrevet.

Fremgangsmåde:

1. Tryk på den orange tænd/sluk-knap.
2. Apparatet vibrerer, og det bakteriedræbende blå lys tændes. Kig ikke direkte ind i lysstrålen.
3. Placer og hold Zap på bumsen i to minutter. Når vibrationen stopper, er behandlingscyklussen færdig.
4. Gentag behandlingen to til tre gange dagligt.

## Tanda Zap-apparatets levetid

Du kan altid standse en behandling ved at trykke på den orange tænd/sluk-knap. Hvis du standser behandlingen inden for de første 30 sekunder, tæller apparatet det ikke med som en behandling. Hvis du standser behandlingen efter de første 30 sekunder, tæller apparatet det med som en behandling.

Tanda Zap-apparatet kan bruges til 1.000 behandlinger. Når der er færre end 50 behandlinger tilbage i Tanda Zap, lyser den orange tænd/sluk-knap konstant rødt efter hver behandling for at minde dig om, at du skal anskaffe et nyt apparat.

Når Tanda Zap har været brugt til 1.000 behandlinger, kan apparatet ikke længere tændes, og den orange tænd/sluk-knap lyser konstant rødt.

## Apparatets indikatorer

Stabil vibration og blåt lys	Apparatet foretager behandling
Apparatet foretager behandling Orange tænd/sluk-knap blinker rødt i 10 sek. efter hver behandling	Batterierne er ved at være flade
Orange tænd/sluk-knap lyser konstant rødt i 10 sek. efter hver behandling	Apparatet har mindre end 50 behandlinger tilbage
Apparatet kan ikke tændes, og den orange tænd/sluk-knap lyser konstant rødt i 10 sek.	Apparatet er løbet tør for behandlinger. Køb et nyt Tanda Zap-apparat!

## Batterilevetid- og udskiftning


Når Tanda Zap-batterierne er ved at være flade, blinker den orange tænd/sluk-knap rødt efter hver behandling. Udskift batterierne med alkaliske AAA-batterier (IEC LR03). Tænk på miljøet! Tanda anbefaler, at du køber et sæt genopladelige AAA-batterier.

Bemærk: Batterilevetiden kan variere ved brug af genopladelige batterier. Det anbefales at bruge NiMH-batterier, der består af nikkelmetalhydrid.

### Sådan isættes og udskiftes batterier i Tanda Zap-apparatet:

1. Drej apparatets øverste del mod uret, så de to trekanten på apparatets øverste del og nederste del står ud for hinanden.
2. Tag de brugte batterier ud af batteriholderen.
3. Isæt tre nye AAA-batterier. Sørg for, at de vender rigtigt som angivet på batteriholderen.
4. Luk Tanda Zap ved at placere de to trekanten ud for hinanden. Tryk de to dele sammen, og drej den øverste del med uret, indtil trekanten står ud for den lodrette streg, og det føles som om, delene sidder godt sammen.

Åbning af Zap-batterirummet

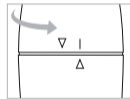

## Bortskaffelse



WEEE (affald af elektrisk og elektronisk udstyr)

Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i EU. For at forhindre eventuel skade på miljøet og menneskers sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse skal produktet afleveres til genbrug for at fremme en bæredygtig genanvendelse af materialeressourcer. Indlever det brugte apparat på en genbrugsstation, eller kontakt forhandleren. De kan sikre, at produktet genbruges på forsvarlig miljøvenlig vis.



Dette symbol betyder, at batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, da de indeholder stoffer, der kan være miljø- og sundhedsskadelige. Bortskaf batterierne ved at lægge dem i en genbrugscontainer.

## Rengøring

Rengør Tanda Zap-behandlingsoverfladen med en fugtig, blød og fnugfri klud og et mildt alkoholfrit rengøringsmiddel.

## Specifikationer

Tanda Zap-apparat = TANDA SERIES 4



TYPE BF ANVENDT DEL



Vigtigt! Se MEDFØLGENDE DOKUMENTER



Følg brugervejledningen.



TÜV-certificeringsmærke. Kapslingskasse IPx5

### RISIKOGRUPPE 2

FORSIGTIG! Der udsendes muligvis skadelig optisk stråling fra dette produkt. Kig ikke på lyset. Det kan være skadeligt for øjnene.



## Anvendelsesspecifikationer

Omgivelsestemperatur:  
5 til 40 °C. Relativ luftfugtighed: 15 til  
93%, ikke-kondenserende;

Atmosfærisk tryk:  
700-1.060 hPa;

Transport-/opbevaringsspecifikationer:  
Omgivelsestemperatur: 0 til 60 °C.  
Relativ luftfugtighed: 10 til 90%

The logo for TANDA, consisting of the word "TANDA" in white, uppercase, sans-serif font, centered within a dark blue rectangular background.The CE certification mark, featuring the letters "CE" in a stylized font followed by the number "0413".

EC	REP
----	-----

mdi Europa GmbH  
Langenhagener Str. 71  
D-30855 Hannover-Langenhagen

Producent:  
Tanda Beauty Canada Inc.  
11-380 Jamieson Parkway  
Cambridge ON, N3C 4N4

Distributør:  
Witt A/S  
Gødstrup Søvej 9  
7400 Herning  
info@witt.dk