



SLIP AF MED UØNSKEDE HÅR FOR ALTID

PERMANENT HÅRREDUKTION

Prøv, at forestille dig det: aldrig mere skarpe barberblade, ubehagelig voks og pincetter, ildelugtende hårfjerningscremer og smertefulde elektrolyse nåle.

Illuminage har skabt en banebrydende, hurtig og nem behandling til permanent at reducere uønskede hår - helt smertefrit!

Den eneste FDA godkendte professionelle Home Beauty Device til permanent hårreduktion af alle hudtoner. Klinisk dokumenteret effekt til den bredeste vifte af hårfarver både til ansigt og krop.

TOUCH

Den første teknologi der kombinerer intens pulserende lys (IPL) og radio frekvens (RF), der tilsammen giver en hurtig, sikker, dybdegående og effektiv behandling, som efterlader huden glat og hårfri.

En puls af lavenergi IPL + en mild RF udsendes synergistisk dybt ned i huden. IPL energien optages af hårskaftet og hårsækken, der opvarmes og ødelægges af den termiske energi. RF energien tiltrækkes af den opvarmede hårsæk, øger varmen og håret ødelægges. RF kan i modsætning til IPL fjerne lyse, røde og grå hår.

Alle hår kan kun påvirkes i vækstfasen, og da vi ofte har flere hår i en hårsæk kræves der flere behandlinger og vedligeholdelse for at opnå og bevare det ønskede resultat. Ideel til brug på hele kroppen og ansigtet. Alle områder behandles min. 7 gange - 1 x ugentligt over en periode på 6 uger.

Hurtig, smertefri behandling - ingen svien eller stikkende irriterende fornemmelse. Komfortabel hårfri behandling - med smukt, tidløst og luksuriøst design.

Kontraindikationer:

- Epilepsi
- Kronisk migræne
- Aktive implantater som pacemaker,

inkontinente apparater, insulinpumper og lign.

- Ører, brystvorter og andre intime områder
- Omkring øjne, vipper og bryn
- Ansigt, kæbe og halsen på mænd
- Børn under 18 år
- Gravid eller prøver på at blive det
- Ammende
- Før og efter soldyrkning
- Områder med tidligere solskade
- Selvbruner
- Tatoveringer
- Pigmentering, modermærker, fregner
- Lysoverfølsomhed
- Sygdomme og medicin der kan give lysoverfølsomhed
- Stråle eller kemoterapi
- Aktiv hudtilstand som akne, psoriasis, herpes og lign.

Hvis du er i tvivl om du kan tåle behandlingen, kan du lave en test af hudens sensitivitet. Udfør behandlingen på et mindre område og vent 30 min. for at se om huden reagerer. Hvis huden bliver rød, venter du 24 timer og sikrer dig, at huden er fal-

det til ro igen, inden du udfører en ny test, evt. med lavere intensitet.

Forberedelse af huden:

- Sørg for at huden er ren og tør inden behandlingen påbegyndes.
- Mørke hår skal være fjernet med shaver, voks eller epilering inden start.
- Lyse hår skal fjernes med voks eller epilator lige inden behandlingen med TOUCH begyndes for at få det bedste resultat.

Tilslutning og indstillinger:


- Tilslut TOUCH til strøm vha. af den vedlagte ledning og tænd på power knappen øverst.
- Indstil intensiteten (lav-mellem-høj) på elös knappen. Det er altid en god ide at starte på lav intensitet. Øg intensiteten, så snart du er sikker på, at du kan tåle behandlingen.
- Aktiver epilator hovedet (hvis det anvendes) på knappen med hårstrå. Du kan vælge mellem lav eller høj hastighed.

Behandling på kroppen:

- Udskift bagsiden af håndstykket med epilatoren hvis du vil epilere imens du udfører lysbehandlingen.
- Hvis huden er klar til behandling, nøjes du blot med lyset og lader derfor bagsiden være på håndstykket.
- Aktiver lyset på den lille blå elös knap på bagsiden.
- Glid roligt henover det område du vil behandle med epilator siden først, mod hårets grøretning. Kontaktsensorerne vil påbegynde lysbehandling ved kontakt med huden. Sørg for, at holde håndstykket oprejst mens du glider henover huden, da lyset ellers ikke aktiveres.
- Hvert område behandles 2-3 gange.
- Efter endt behandling skal huden have ro.
- Varme bade, aktiv creme-pleje og sol anbefales ikke.

Behandling af ansigtet:

- Udskift bagsiden af håndstykket med den lille ansigtsadapter, der dækker så du kun behandler et mindre område.
- Placer håndstykket på det område du ønsker at behandle og aktiver på den lille blå elös knap bag på håndstykket. For hver gang du behandler et nyt område, gentages ovenstående proces. Efter 10 sekunder kan området behandles igen. Gentag 2-3 gange.

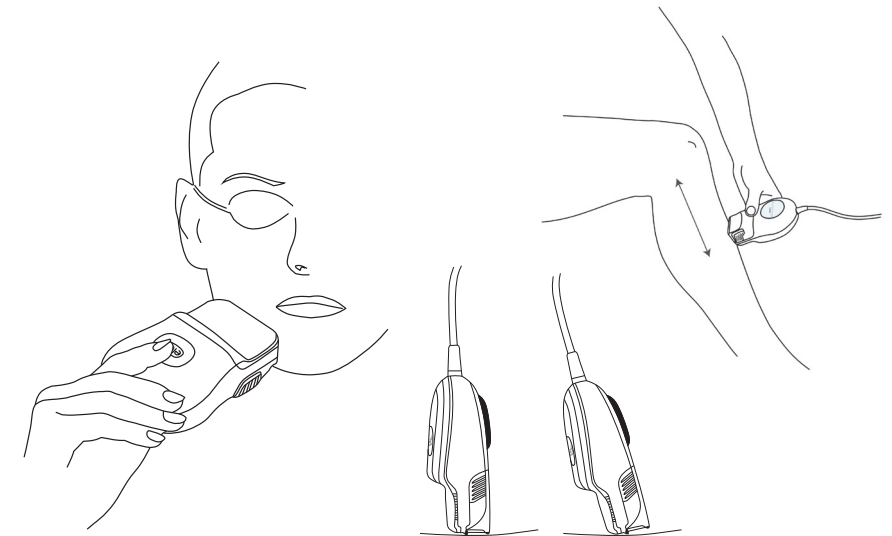

MULIGHEDER FOR TILKØB

Shaver Head:

Indsæt den sammen med lyspatron og barber huden imens IPL og RF fjerner hårene permanent.

Epilator Head:

Epilerer huden imens lyspatronen fjerner hårene permanent. Der medfølger et stk. i startpakken. Der kan tilkøbes ekstra Epilator Head, hvis flere ønsker at anvende samme TOUCH.

Quartz Cartridge:

Ekstra lyspatron med 300.000 lys impulser, kan tilkøbes når impulserne fra startpakken er brugt op eller flere ønsker at anvende den samme TOUCH.

ILUMINAGE TOUCH SPECIFIKATION

Lysspektrum:	550-1200 nm
RF frekvens:	5 Watt
Max RF energi:	6.78 MHz
IPL gentagelse:	Op til 1.1 Hz (1 puls hvert 0.9 sekund)
Elektricitet:	100-240~2A, 50-60 Hz

